

2026_KC_GRP_002

Quels sont les avantages de KELO-COTE® ?

Il existe de nombreuses caractéristiques et avantages à utiliser **KELO-COTE®**, ce qui facilite l'atténuation de vos cicatrices [3].

KELO·COTE®
PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CICATRICES

- Aide à **adoucir** et **aplatir** les cicatrices
- **Formule cliniquement prouvée** [2]
- **Réduit les rougeurs**, soulage les **démangeaisons** et **l'inconfort**
- Convient aux **enfants** et aux **adultes** (à partir de **3 mois** pour UV et gel)
- **Transparent** et **inodore** (produits non-UV)
- **Souple** et **résistant à l'eau,** avec une **protection** de **24 heures**
- Peut être **utilisé sous** le **maquillage**
- Également disponible en **gel SPF 30**

RECOMMANDÉ PAR LES CHIRURGIENS PLASTICIENS (1)



Dispositif médical réservé exclusivement à un usage externe. Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants de KELO-COTE® Gel. Éviter le contact direct avec les yeux, les muqueuses, les brûlures du troisième degré et les plaies ouvertes. KELO-COTE® Gel ne doit pas être utilisé sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau. En cas d'irritation, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

KELO·COTE® PRÉVENTION & TRAITEMENT DES CICATRICES

(1).GOLD MH et al. Dermatol Surg 2014;40:825-831
(2).Sepehrmanesh, M. (2006) Scar Management: Observational study of 1522 patients using Kelo-Cote® Silicone Gel. Komp Detmatologie. 1; 30–32
(3) Notice Kelo-Cote.

BIOCODEX Benelux

5287_kelo_cote_Leaflet_A4.indd 1 14/11/25 09:00

Avez-vous une cicatrice indésirable ?

Si oui, vous n'êtes pas seul, car elles sont extrêmement courantes. En fait, la plupart des gens ont une cicatrice quelque part sur leur corps.

KELO-COTE® Traitement des Cicatrices est cliniquement prouvé pour aider à **adoucir**, **aplatir** et **lisser** les cicatrices surélevées.

Cette formule avancée réduit également la décoloration, les rougeurs ainsi que les démangeaisons et l'inconfort associés aux cicatrices résultant de[2] :




Chirurgie

Les cicatrices hypertrophiques peuvent apparaître après une chirurgie. **KELO-COTE®** a démontré son efficacité sur les cicatrices surélevées et/ou de couleur rougeâtre.[2]



Césariennes

Une césarienne laisse une cicatrice légèrement surélevée. Si vous cherchez à traiter une cicatrice, un gel de silicone tel que **KELO-COTE®** peut vous aider.

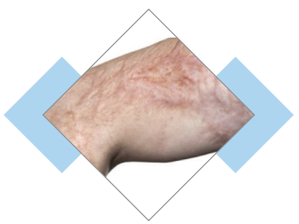

Brûlures

Les cicatrices hypertrophiques, les brûlures graves peuvent provoquer des cicatrices. **KELO-COTE®** est utile pour les cicatrices sensibles comme celles causées par les brûlures.



Chirurgie esthétique

Si vous avez subi ou envisagez une chirurgie esthétique, parlez à votre chirurgien de la formule cliniquement prouvée de **KELO-COTE®**

Comment utiliser KELO-COTE® ?



Commencez le traitement dès que la plaie est **fermée** et que les **points de suture sont retirés**. Assurez-vous que la zone est propre et sèche.



Appliquez une **fine couche** de **KELO-COTE®** sur la cicatrice **deux fois par jour**. Ne pas masser.



KELO-COTE® sèche en **moins de 5 minutes** pour former une couche flexible, transparente et résistante à l'eau. Retirez tout excédent de produit s'il ne sèche pas complètement. Une fois sec, il est possible d'appliquer de la **crème solaire ou du maquillage**.



La **durée minimale de traitement recommandée** est de **60 à 90 jours**. Si la cicatrice continue de s'améliorer après 90 jours, il est conseillé de **poursuivre l'application**.


Comment fonctionne KELO-COTE® ?

Le gel de silicone pour cicatrices **KELO-COTE®** sèche en moins de **5 minutes** après application, formant une couche **respirante et résistante à l'eau** sur la zone affectée, agissant comme une **seconde peau**.

Cette fine couche transparente de silicone se lie à la couche externe de cellules mortes pour **protéger les tissus sous-jacents** contre les agressions chimiques et physiques de la cicatrice.

Cette couche de silicone aide à maintenir **l'hydratation** et crée un environnement propice à une **production normale de collagène**.

Avant l'utilisation de KELO-COTE®

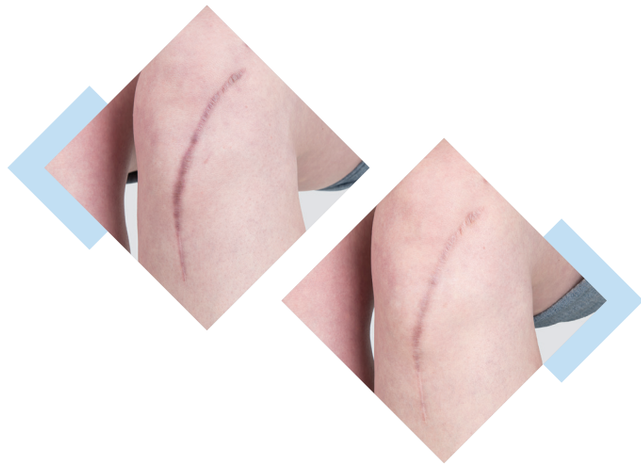

Après 90 jours d'utilisation de KELO-COTE®

KELO·COTE®
PRÉVENTION & TRAITEMENT DES CICATRICES

KELO·COTE®
PRÉVENTION & TRAITEMENT DES CICATRICES